

# Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

nach § 11 MPBetreibV


## Vorbereitet, wenn es darauf ankommt!

Der Herztod ist die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern in Deutschland. Die Zeit, die vergeht, bis eine Wiederbelebung und eine Defibrillation stattfindet ist entscheidend. Mit der Bereitstellung eines AED tragen Sie dazu bei, die Überlebenschancen von Betroffenen zu erhöhen.

Im Notfall ist die Funktionstüchtigkeit des AED entscheidend und eine regelmäßige Kontrolle nicht nur sinnvoll, sondern auch Pflicht. Bei einem AED handelt es sich um ein Medizinprodukt, das der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt. Somit ist der Betreiber des Gerätes verpflichtet einen Geräteverantwortlichen zu bestimmen, ein Medizinproduktebuch anzulegen und durch regelmäßige Kontrollen (STK) für eine sichere Nutzung zu sorgen.

**Als Betreiber eines AED tragen Sie die Verantwortung – WERO steht Ihnen dabei als kompetenter Partner zur Seite.**

## Die Prüfplakette – was steckt hinter der STK?

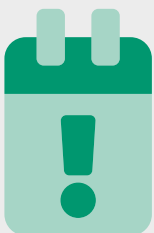

Ähnlich zur TÜV Prüfung Ihres Autos handelt es sich bei der STK für Ihren AED um eine periodische Sicherheitsüberprüfung und findet alle zwei Jahre statt.



Die STK ist für AEDs laut § 11 MPBetreibV Pflicht. Entfallen kann die STK für selbsttestende und zur Nutzung durch den Laien bestimmte Geräte, die im öffentlichen Raum platziert sind und einer regelmäßigen Sichtprüfung unterliegen.

*Eine allgemeine  
Befreiung von der STK  
ist nach  
§ 11 MPBetreibV  
nicht mehr möglich.*

## WAS WIRD GEPRÜFT?

- ⌚ Kontrolle auf äußerliche Beschädigungen
- ⌚ Messung der Sicherheitsentladung
- ⌚ Prüfung der Verfalldaten von Elektroden und Batterien
- ⌚ Prüfung der Analysefunktion
- ⌚ Messung der Energieabgabe (Kinder/Erwachsene)
- ⌚ Erstellung des Messprotokolls zur Anlage im Medizinproduktebuch
- ⌚ Messung der Ladezeiten

## WIE LÄUFT DIE STK AB?

1



Online Formular ausfüllen  
Optional: Buchung einer  
STK vor Ort

2



AED inkl. Elektrode und  
Batterie sorgfältig ein-  
packen und zur Abholung  
bereitstellen

3



Durchführung  
der STK

4



AED geprüft  
und gewartet  
zurück erhalten

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Keine STK mehr verpassen – Rundumservice für Ihren AED
- ✓ Erfüllt die in § 7 Absatz 3 und § 11 geforderten Anforderungen der MPBetreibV
- ✓ Schon ab 1 Gerät ist eine Vor-Ort-Prüfung möglich
- ✓ Konformität mit den aktuellen ERC Richtlinien

Weitere Details über Ablauf und Bedingungen unter [stk.wero.de](https://stk.wero.de)



Für folgende AED-Typen kann eine STK durchgeführt werden:

- ⌚ Philips HS1
- ⌚ Philips FRX
- ⌚ Medical Econet ME PAD
- ⌚ Defibtech Lifeline
- ⌚ Primedic Heart Save ONE, PAD
- ⌚ Primedic Heart Save AED, AS, AED-M
- ⌚ Stryker HeartSine PAD 350P, 360P, 500P
- ⌚ Stryker LIFEPAK 1000
- ⌚ Stryker LIFEPAK CR Plus
- ⌚ Schiller FRED PA -1, DefiSign Life